

アレン スターラップカート

取扱説明書



1. 安全上の注意

- 1) 使用目的以外に使用しないでください。
- 2) 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。

2. 製品概要と各部の名称

本品は、アレンメディカル社のレッグスプレッダー又はイエローフィン（いずれも別売）の収納にご使用できます。また、ベースには、クランプ等のアクセサリ類を収納することができます。

①スタンド



②ベース(キャスター付)



③固定ネジ



⑤ロックタイト



④六角レンチ



構成品	数量
①スタンド	1
②ベース(キャスター4個付、内ロック付キャスター2個)	1
③固定ネジ	2
④六角レンチ	1
⑤ロックタイト	1


注文コード	品番	品名
623-003-10	A-30015	アレン スターラップカート

3. 組立・設置方法

- 1) スタンドをベースの突起部分にしっかりと差し込んでください。

⚠ 注意

スタンドのネジ穴と、ベースの突起部分のネジ穴が同じ方向を向くようにスタンドを差し込んでください。

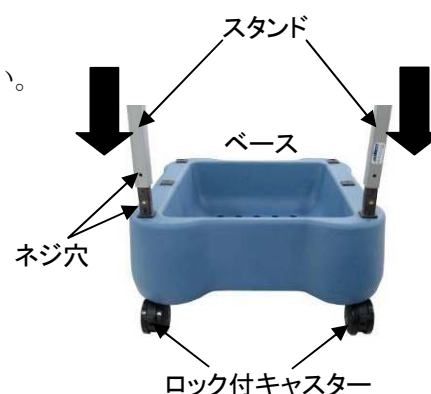

- 2) 固定ネジのネジ山部分にロックタイトをうすく均等に塗布してください。

⚠ 注意

ロックタイトは塗布しすぎないように注意してください。ネジ穴に差し込みにくくなります。



- 3) スタンドのネジ穴（2箇所）にロックタイトを塗布した固定ネジを差し込み、付属の六角レンチでスタンドとベースをしっかりと固定してください。

⚠ 注意


ロックタイトを塗布して差し込んだ固定ネジは再調整できません。斜めにならないよう、最後まできっちりネジ止めしてください。



4. 使用方法


- 1) レッグスプレッター又はイエローフィン（いずれも別売）のレバー式操作ハンドルを、本品のフックにかけて収納します（左右どちらのフックにも取付可能です）。

フック部拡大図

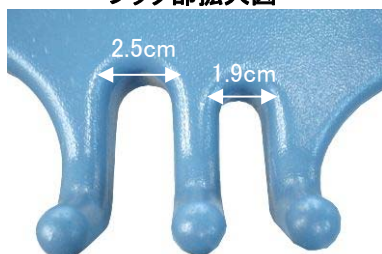

- 2) 保管する際は、スタンド側のロック付キャスター（2箇所）の固定レバーを足先で押し下げてロックしてください。

固定レバーを押し下げる

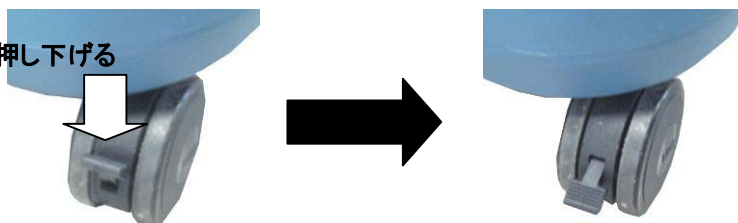

5. 清掃方法

中性洗剤又はアルコールで湿らせた布で清拭した後、乾いた布で拭いて乾かしてください。

⚠ 注意

故障の原因となりますので、漂白剤は使用しないでください。

6. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>